



ミラー式プローブ


長時間 (終夜) の使用には圧迫感の無いミラー式プローブが最適!

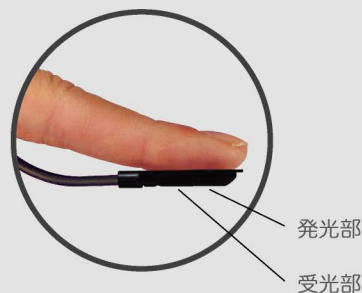

- 圧迫感の軽減装着
- 絆創膏 (バンドエイドタイプ) の使用により、指への装着が容易。装着ミスやズレの軽減。

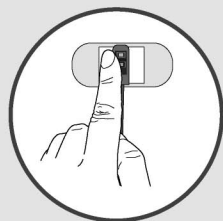

弊社製のパルスオキシメータはISO規格コ・オキシメータ (採血) との比較で高い正確度 (Arms値) が実証されております。

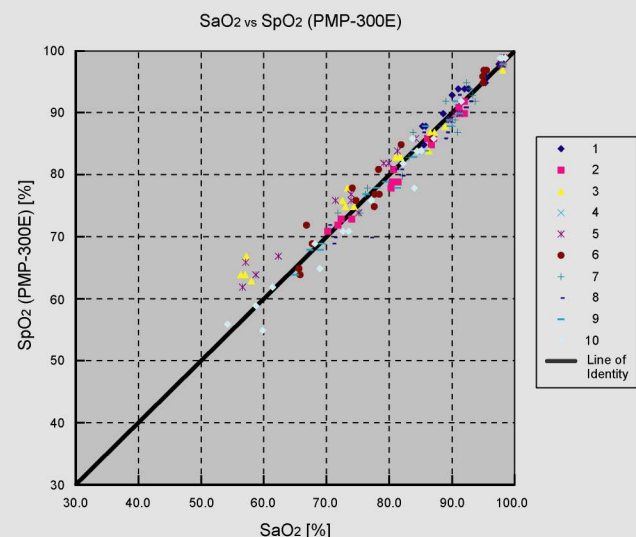

アクセサリ

<p>SpO₂プローブ (長時間用モニタセンサ)</p> <p>P/N: PWJ041 (PMP-300E: 成人用) PWJ023 (PMP-300E: 小児用) PWJ022 (PMP-200Gplus)</p>	<p>フィンガーストリップ (10pcs)</p> <p>P/N: PWJ045 (成人用) PWJ082 (小児用)</p>	<p>呼吸用センサケーブル (20pcs)</p> <p>P/N: PWJ049 (成人用) PWJ070 (小児用)</p>	<p>ベルト (5pcs)</p> <p>P/N: PWJ077 (PMP-300E: 100cm) PWJ079 (PMP-300E: 70cm) PWJ029 (PMP-200Gplus: 28cm)</p>	<p>ACアダプタ</p> <p>P/N: ① PWJ038 (PMP-300E) ② PWJ071 (PMP-200Gplus)</p>	<p>USBケーブル</p> <p>P/N: PWJ004</p>
<p>解析ソフト "NEO" (Smart Watch)</p> <p>P/N: PSW005EJ</p>	<p>解析ソフト (Pulse Watch)</p> <p>P/N: PWP005</p>	<p>キャリングケース (Smart Watch)</p> <p>P/N: PWJ038</p>	<p>キャリングケース (Pulse Watch)</p> <p>P/N: PWJ010</p>	0123	

● 外観、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

製造販売元 パシフィックメディコ 株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷2-15-13 5F
Phone: 03-5844-3507 Fax: 03-5844-3508
www.pacific-medico.com

製造元 パシフィック電子株式会社
〒410-0012 静岡県沼津市岡一色650-6
Phone: 055-927-6861 Fax: 055-927-6862

052210101

PORTABLE SLEEP DIAGNOSTIC DEVICES

携帯用睡眠時無呼吸検査装置

Smart Watch PMP-300E

Pulse Watch PMP-200Gplus



PACIFIC MEDICO

Effort (呼吸努力) と体位の詳細分析

Smart Watch


PMP-300E

- 世界最小・最軽量わずか80g
- 本体内蔵のGセンサが腹部の動きをエフォートとしてとらえる新構造
- 専用解析ソフトはポリソムノグラフ (アリス5) との対比で高い一致率



- Flow
- Effort
- Snore
- SpO2
- PR
- Position
- Activity

標準価格：430,000円 (税込451,500円) (保証1年)

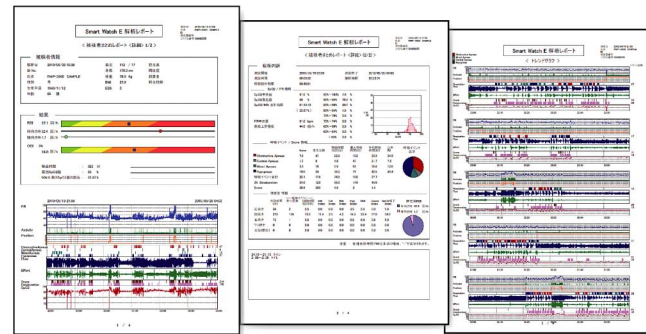

仕様

■呼吸・いびき 検出方式	圧力センサ方式
■SpO2・脈拍数 測定方式	パルスオキシメトリ法
測定範囲	SpO2 0-100%
	脈拍数 30-250回/分
測定精度	SpO2 70-100%±2digits
	60-69%±3digits
	59%以下は規定無し
	脈拍数 ±2%又は±2回/分のうち大きい方
■呼吸努力・体位 測定方式	Gセンサ方式 (方向: XYZ3軸)
■電源	充電式リチウムイオンバッテリー 容量 操作時 連続測定50時間以上
■寸法・重さ	W112 H33 D55(mm)・80g
■業事承認番号	21900BZX00419000

標準構成

・PMP-300E 本体	1
・SpO2 プローブ (長時間用モニタセンサ)	1
・絆創膏 (バンドエイドタイプ)	4
・フィンガーストリップW	1
・呼吸用センサカニューレ	1
・上腹部ベルト	1
・専用ACアダプタ	1
・USBケーブル	1

オプション

解析ソフト "NEO"	価格：70,000円 (税込73,500円)
専用キャリングケース	価格：3,600円 (税込3,780円)

睡眠分析を可能にした内蔵Gセンサ



PulseWatch Gplus

- 体動センサ!
(入眠、レム、トイレ起床等の客観的分析が可能)
- 圧迫感の無いミラー式SpO2プローブ採用!
- 内蔵充電バッテリー方式
(連続測定50時間以上、記録保管6ヵ月)



- SpO2
- 脈拍数
- 体動

標準価格：148,000円 (税込155,400円) (保証2年)

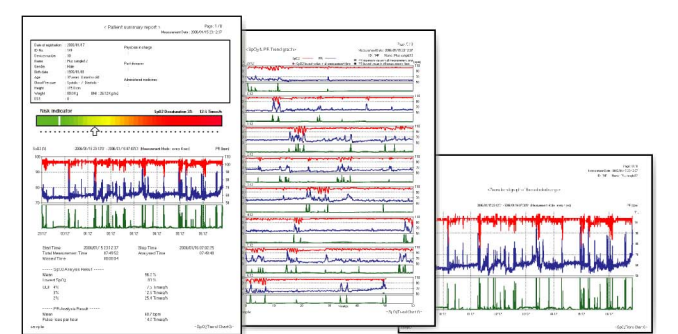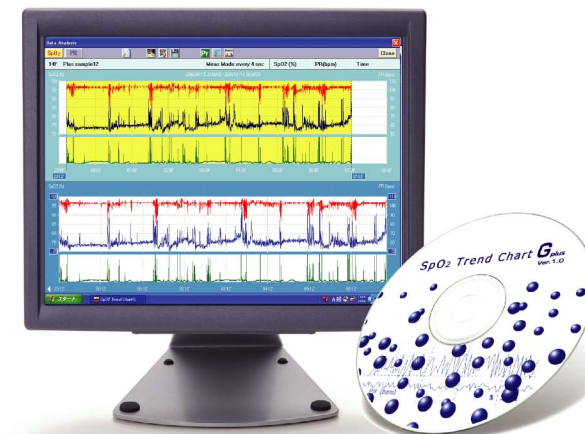

仕様

■SpO2・脈拍数 測定方式	パルスオキシメトリ法
測定範囲	SpO2 0-100%
	脈拍数 30-250回/分
測定精度	SpO2 70-100%±2digits
	60-69%±3digits
	59%以下は規定無し
	脈拍数 ±2%又は±2回/分のうち大きい方
■体動 測定方式	Gセンサ方式 (方向: XYZ3軸)
■電源	充電式リチウムイオンバッテリー 容量 操作時 連続測定50時間以上
■寸法・重さ	W80 H27 D47(mm)・60g
■業事承認番号	221AHBZX00005000

標準構成

・PMP-200Gplus 本体	1
・SpO2 プローブ (長時間用モニタセンサ)	1
・絆創膏 (バンドエイドタイプ)	4
・フィンガーストリップW	1
・腕時計ベルト	1
・専用ACアダプタ	1
・USBケーブル	1

オプション

解析ソフト	価格：20,000円 (税込21,000円)
専用キャリングケース	価格：1,200円 (税込1,260円)